



ENTRETIEN

APPAREIL AUDITIF INTRA-AURICULAIRE

Chaque jour, votre appareil auditif est au contact avec la poussière, l'humidité et les bactéries. Pour un fonctionnement optimal, il est important de le nettoyer au quotidien. Cela ne prend que quelques minutes.

Rendez-vous dans un centre auditif tous les trois mois pour un nettoyage approfondi. Nous pouvons ainsi vous garantir une bonne qualité sonore et une utilisation optimale de votre appareil. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne afin d'éviter les temps d'attente.

1. Nettoyage

Hoorcentrum Aerts propose des lingettes conçues pour nettoyer et désinfecter les appareils auditifs sans les décolorer. Prenez une lingette de la boîte et utilisez-la pour éliminer la saleté visible de votre appareil auditif.



LINGETTES HUMIDES

Lingettes pour nettoyer votre appareil auditif.




LIQUIDE DE NETTOYAGE


Versez-en sur une lingette et nettoyez votre appareil auditif.

2. Retrait du haut-parleur : remplacement du filtre


Le filtre du haut-parleur protège votre appareil auditif. Si le haut-parleur n'est pas totalement propre, le son de votre appareil auditif sera affaibli. Les filtres doivent donc être régulièrement remplacés. Demandez les brossettes adaptées à votre audiologue*.

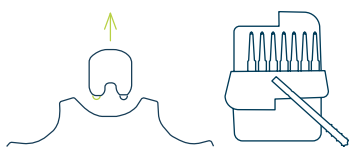

Sortez une brossette ou une rondelle munie d'un filtre de la boîte.

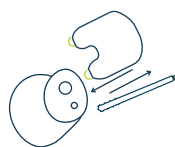

Utilisez le côté sans filtre pour retirer l'ancien filtre du haut-parleur. Pour ce faire, effectuez un mouvement de rotation.

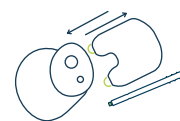

Tournez ensuite la brossette et poussez le nouveau filtre dessus. Retirez à nouveau la brossette. Le filtre est remplacé.



3. Séchage

Lorsque vous portez votre appareil auditif, il est exposé à l'humidité, comme la pluie et la transpiration. Un appareil auditif se compose en grande partie de pièces électroniques. Il est donc essentiel qu'il reste sec. Pour conserver votre appareil auditif en parfait état, il est recommandé de le sécher tous les soirs à l'aide d'une pastille déshydratante ou d'une boîte de séchage.



BOÎTE DE SÉCHAGE

Pour le séchage à l'aide de pastilles déshydratantes.



PASTILLES DÉSHYDRATANTES

Pour sécher votre appareil auditif au quotidien.



BOÎTE DE SÉCHAGE

Système de séchage électrique avec filtre UV désinfectant.


3.1 Boîte de séchage

Les appareils auditifs rechargeables peuvent être à la fois rechargés et séchés à l'aide d'un dispositif combiné.


Vous avez un appareil auditif à batterie ?

1. Sortez la batterie de votre appareil auditif.
2. Placez l'appareil auditif dans votre boîte de séchage.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage. Les témoins sur le dessus s'allument. Une lampe UV éliminera les bactéries de votre appareil lors des premières minutes. L'humidité sera éliminée par la circulation d'air chaud.


3.2 Pastille déshydratante

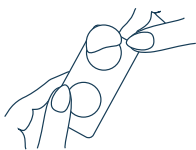

Sortez votre pastille déshydratante de l'emballage. Veillez à ce que la boîte soit bien fermée.

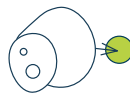

Vous n'avez pas d'appareil auditif rechargeable ? Sortez la batterie de votre appareil auditif.

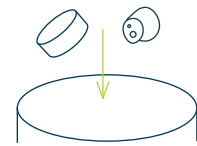

Placez la pastille et votre appareil auditif dans une boîte de séchage ou le chargeur de votre appareil auditif. Fermez bien votre boîte ou votre chargeur. Laissez le tout reposer toute la nuit. Remplacez la pastille déshydratante au bout d'un mois, lorsqu'elle est devenue blanche.